




Handleiding

# Star Line

- Medische Trolleys

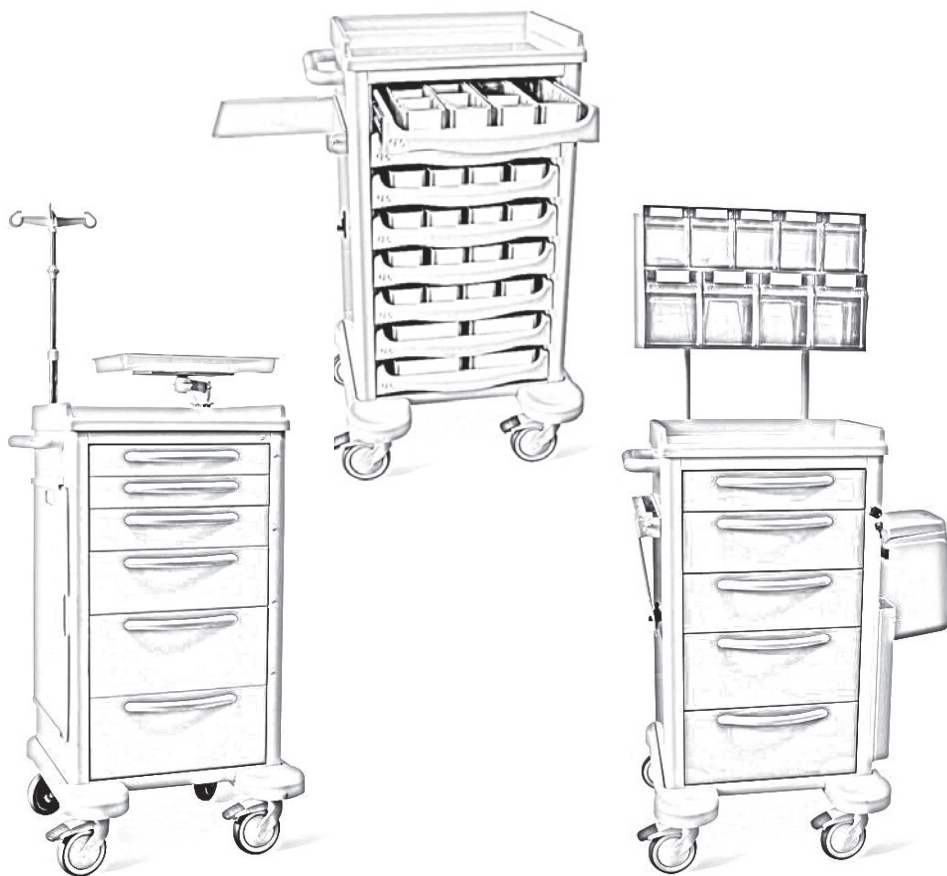

Hartelijk dank voor uw aankoop van een CFS ITALIA-  
medicijnwagen. Lees deze handleiding voor gebruik  
van uw nieuwe medicijnwagen goed door.  
Als u vragen heeft, neem dan gerust contact op met Doove Care  
Groep, de vertegenwoordiger van CFS ITALIA in Nederland.



www.imq.it

**CERTIFICATO N.  
CERTIFICATE N. 9190.CFS1**

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI  
WE HEREBY CERTIFY THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

**CFS ITALIA SRL**

VIA AQUILEIA 8/A - 31048 SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV)

UNITÀ OPERATIVE / OPERATIVE UNITS

VIA AQUILEIA 8 - 31048 SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV)

E' CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD  
**ISO 9001:2015**

PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

Produzione e commercializzazione di carrelli e arredo ospedaliero fisso e mobile  
*Production and marketing of fixed and mobile hospital furnishings and trolley*

Ulteriori informazioni riguardanti l'applicabilità dei requisiti ISO 9001:2015 possono essere ottenute consultando l'organizzazione  
Further clarifications regarding the applicability of ISO 9001:2015 requirements may be obtained by consulting the organization

IL PRESENTE CERTIFICATO E' SOGGETTO AL RISPETTO DEL  
REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE  
THE USE AND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE SHALL SATISFY THE  
REQUIREMENTS OF THE RULES FOR CERTIFICATION OF MANAGEMENT SYSTEMS

DATE:	PRIMA CERTIFICAZIONE FIRST CERTIFICATION	EMISSIONE CORRENTE CURRENT ISSUE	SCADENZA EXPIRY
	2004-01-30	2021-01-21	2022-01-29

IMQ S.p.A. - VIA QUINTILIANO, 43 - 20138 MILANO ITALY  
Management Systems Division - Flavio Ornago



SGQ N° 005 A

Ministero degli Affari Interni  
Ministero della Sanità, IMQ è l'Ente  
Agente di IMQ, IMQ and SAC  
IMQ Accreditation Agreement

IAF: 17, 29

La validità del certificato è subordinata a sorveglianza continua e riesame completo  
del Sistema di Gestione con periodicità triennale  
The validity of the certificate is subject to annual audit and a reassessment  
of the entire Management System within three years



Direzione di Certificazione Italiana (CISQ)  
www.imq.it



www.cisq.com

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di  
Certificazione dei Sistemi di Gestione Aziendale.  
CISQ is the Italian Federation of management  
system Certification Bodies.

## **Beoogd gebruik**

Medische trolleys vervaardigd door CFS ITALIA zijn ontworpen voor het transport van materiaal in ziekenhuizen en medische omgevingen. Het transport en gebruik van de handbediende trolleys is uitsluitend toegestaan voor verplegend en medisch personeel.

De karren mogen geen materiaal vervoeren dat de maximale capaciteit te boven gaat. Draagvermogen: 35 kg per lade.

De trolleys zijn ontworpen en gebouwd om functioneel, gebruiksvriendelijk, ergonomisch en veilig te zijn tijdens gebruik.

## **Transport en Montage**

De wagen moet volledig gemonteerd worden geleverd, met uitzondering van enkele optionele accessoires. Instructies voor het monteren van deze optionele accessoires vindt u in de wagen, indien nodig.

De verpakking is gemaakt om de inhoud te beschermen, zowel tijdens de verwerkingsfasen als tegen de werking van externe omgevingsfactoren.

## **Werking**

### ***Remmen***

De medicijnwagen heeft twee afzonderlijk vergrendelbare wielen en twee zwenkwielen. Druk op het pedaal om de vergrendeling te activeren. Hiermee kunt u voorkomen dat de kar in welke richting dan ook beweegt.

Dankzij het richtingswiel (optie) kunt u hem in één richting zetten en de wagen gemakkelijk duwen en draaien.

De twee antistatische zwenkwielen (optie) beschermen tegen elektrostatische ontladingen.

### ***Laden vergrendelen/ontgrendelen***

De werking van het slot is afhankelijk van het slot dat geïnstalleerd is.

Om de wagen met een **sleutelslot** te ontgrendelen steekt u de sleutel in het slot en draait u de sleutel in de juiste richting.

Als u voor een break-away slot kiest, zijn er mogelijk drie opties:

1) Break-away slot met *klepdeur*

Ontgrendelen: trek aan de klep totdat de verzegeling is verbroken.

Vergrendelen: sluit alle laden en de klepdeur en plaats vervolgens de plastic verzegeling om te voorkomen dat er met de inhoud wordt geknoeid.

2) Break-away slot met *knop*

Ontgrendelen: draai aan de knop totdat de verzegeling is verbroken.

Vergrendelen: draai de knop in de tegenovergestelde richting door er lichtjes op te drukken. Wanneer vergrendeld, plaatst u de verzegeling.

3) Break-away slot met *hendel*

Ontgrendelen: draai de metalen hendel naar de ontgrendelde positie.

Vergrendelen: draai de hendel terug naar de vergrendelde positie.

In de vergrendelde positie kunt u een plastic verzegeling plaatsen om te voorkomen dat er met de inhoud wordt geknoeid.

Indien u voor een **elektronisch slot** heeft gekozen, worden er speciale instructies meegeleverd voor de bediening van deze sloten. Deze instructies laten u zien hoe u de wagen kunt ontgrendelen/ vergrendelen, de combinatie kunt wijzigen of nieuwe codes kunt programmeren.

### ***Afvalbak***

De deksel van een kniebediende afvalbak kunt u openen door uw knie tegen de bak te duwen. Bij een afvalbak met pedaalbediening opent u de deksel door met de voeten op het pedaal te drukken. De deksel sluit automatisch zonder uw handen te gebruiken. Montage-instructies worden apart meegeleverd.

### ***Infuuspaal***

Dankzij de éénhandsverstelling kan de hoogte van de infuuspaal op de gewenste positie worden aangepast. Pak de buis eenvoudig met één hand vast en duw hem met de duim omhoog.

## Optionele accessoires

Gebruik alleen officiële accessoires van CFS ITALIA op uw medicijnwagen. Deze accessoires zijn speciaal ontworpen om naadloos te integreren met uw medicijnwagen. Als u probeert accessoires van een ander merk te gebruiken, kan de wagen beschadigd raken en kan de garantie vervallen. We hebben genoeg opties om uit te kiezen. Neem contact op met Doove Care Groep.

## Preventief onderhoud

Om optimale prestaties te garanderen, adviseert CFS ITALIA een periodieke inspectie van de medicijnwagen. Hierdoor blijft de veiligheid en continuïteit van uw wagen gewaarborgd.

Onderdelen	Actie	Voordeel
<b>Remmen</b>	Controleer of de zwenkwielen goed vastzitten, vrij zijn van vuil en roet en soepel werken.	Verkleint het risico op letsels door losse wielen. Zorgt voor een goede manoeuvreerbaarheid van de kar.
<b>Werkblad</b>	Controleer het werkblad op vuil en schade.	Bevordert infectiepreventie
<b>Laden</b>	Controleer de functionaliteit van laden, inclusief vergrendelingsopties.	Soepele bediening van de lades zorgt voor veilige, georganiseerde opslag
<b>Accessoires</b>	Controleer of de gemonteerde accessoires goed vastzitten en draai ze indien nodig vast.	Zorgt voor een stabiele wagen.

## **Veiligheidswaarschuwingen**

- NIET STAAN op de wagen. U kunt vallen en dit kan persoonlijk letsel veroorzaken.
- Wanneer u dit product verplaatst, mag u er niet aan trekken. Duw tegen het product om persoonlijk letsel te voorkomen. Gebruik de juiste handgreep om de wagen te duwen; trek er niet aan door gebruik te maken van de laden, de infuusstandaard, de opstaande randen van het werkblad enz., aangezien dit persoonlijk letsel of schade aan het product kan veroorzaken.
- GEBRUIK DE REMMEN wanneer de wagen stilstaat. Hierdoor wordt voorkomen dat de wagen gaat rollen, wat persoonlijk letsel of productschade kan veroorzaken.
- STAP NIET IN DE LADEN. U kunt vallen en dit kan persoonlijk letsel veroorzaken.
- DRAAG EEN VEILIGHEIDBRIL bij het verwijderen of verplaatsen van het verdelingsstelsel. Het gereedschap kan wegglijden, wat persoonlijk letsel kan veroorzaken.
- BRENG GEEN WIJZIGINGEN AAN AAN DE WAGEN tenzij dit is goedgekeurd door de fabrikant.
- Gebruik de wagen op een vlakke ondergrond. De wagen kan zeer voorzichtig op hellende oppervlakken worden gebruikt.

## **Reiniging**

Gebruik alleen schoonmaakmiddelen die door de fabrikant worden aanbevolen.

Voor het reinigen van de karren kunt u alle traditionele 2% waterproducten voor huisreiniging gebruiken.

Gebruik geen bijtende producten. Gebruik heet water (maximumtemperatuur 70°).

Als u vloeibare schoonmaakmiddelen gebruikt, zorg er dan voor dat er geen druppels in de trolley vallen.

## **Garantie**

CFS ITALIA biedt twee jaar garantie op onderdelen. Als tijdens de garantieperiode een medicijnwagen bij normaal gebruik materiaal- of fabricagfouten vertoont, neem dan contact op met Doove Care Groep.

CFS Italia streeft ernaar de beste service in zijn klasse te bieden.

Zorg ervoor dat u alle informatie vermeldt, inclusief het serienummer van het product (zie label hieronder), een beschrijving van het probleem en foto's van de schade.

CFS ITALIA zal bepalen hoe het probleem het beste kan worden opgelost. De garantie dekt geen productmisbruik, zelfgemaakte aanpassingen, het niet naleven van de productinstructies of onjuiste bediening/misbruik. Eventuele reparaties of wijzigingen aan de medicijnwagens moeten worden uitgevoerd door personeel dat uitsluitend is geautoriseerd door CFS Italia.

C.F.S.

[www.cfsitalia.com](http://www.cfsitalia.com)

Lotto 259 11 / 2020

Cod. Art. : 6050/R

made in Italy



Via Aquileia 8, Olmi di S. Biagio di  
Callalta (TV) – ITALY

Phone n°: +39 0422 398553

E-mail: [export2@cfsitalia.com](mailto:export2@cfsitalia.com)

Website : [www.cfsitalia.com](http://www.cfsitalia.com)



CFS ITALIA S.R.L.  
TECHNICAL DEPARTMENT

Information and specifications are subject to  
change without notice.

Save this document for future application.

