

# ANTI-DECUBITUS MATRASSEN

---

HET MEEST COMPLETE ANTI-DECUBITUS SYSTEEM  
VAN NEDERLAND

## QUATTRO<sup>®</sup> PLUS



DOOVECAREGROEP




- TISSUEgard™ air cell technologie met ODS™
- 2 therapiestanden: 1-op-4 wisseldruk en continue lage druk
- AUTOsupport™ automatische drukinstelling
- Low Air Loss functie
- Comfortregeling
- PHASE FLOW™ energie zuinig
- Akoestisch en visueel alarm en foutmelding indicatie
- Gehele matras is volledig wasmachine bestendig
- CPR functie
- Max. vulling van matras
- Transport functie
- Dampdoorlatende, waterdichte, in twee richtingen rekbaar hoes
- Hoes met gelaste naden
- Kabelmanagement



# QUATTRO<sup>®</sup> PLUS

PREVENTIEF EN CURATIEF INZETBAAR BIJ  
ALLE DECUBITUS CATEGORIEËN

## OPTIMALE ANTI-DECUBITUSWERKING, OPTIMAAL COMFORT

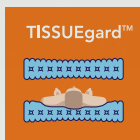

De QUATTRO<sup>®</sup> PLUS is uitgerust met de gepatenteerde TISSUEgard™ air cell technologie. Door de unieke vormgeving van de cellen wordt er een optimale ondersteuningsdruk bereikt en hebben schuifkrachten geen kans.



De QUATTRO<sup>®</sup> PLUS heeft 2 therapiemogelijkheden; een 1-op-4 wisseldrukcyclus en een continue lage druk. De 1-op-4 wisseldrukcyclus zorgt voor een goede doorbloeding.



Door de AUTO support™ functie past het systeem de druk automatisch aan op het gewicht en de houding van de patiënt.



De QUATTRO<sup>®</sup> PLUS is voorzien van het Low Air Loss concept. De aanhoudende luchtstroom, die onder de hoes geblazen wordt, vermindert de kans op verweking van de huid zonder de wond uit te drogen of te infecteren.

# QUATTRO<sup>®</sup> PLUS

Bedenk eens wat de Quattro<sup>®</sup> Plus voor uw organisatie kan betekenen. Eén systeem voor al uw patiënten met (risico op) decubitus dat

- Zorgt voor eenduidigheid in uw decubitusbeleid
- Eenvoudig is in gebruik
- Tot kostenbesparing leidt
- Bekijk onze [productvideo](#)

## Decubitus is onnodig



Veel zorginstellingen zijn tevreden als ze een prevalentiescore op decubitus van rond de 10% halen. En misschien wel terecht. Maar waarom accepteren we eigenlijk nog decubitus? Als we met elkaar de kwaliteit in de zorg willen verbeteren, moeten we ambitieuze doelen stellen.



Wij voegen de daad bij het woord en brengen met onze 0% Challenge de interne decubitusprevalentie binnen een zorginstelling terug naar 0%. Onderdeel van dit concept is de 24-uurs aanpak; de inzet van de Quattro<sup>®</sup> Plus in combinatie met een dynamisch zitkussen waarborgt een optimale preventie en behandeling van decubitus 24 uur per dag.

## Specificaties QUATTRO<sup>®</sup> PLUS

Lengte matras	1950-2200 mm	Cyclustijd	15 min.
Breedte matras	780-880 mm	Maximale belasting	200 kg
Hoogte matras	160 mm	Voltage	220/240 V 50 Hz
Gewicht matras	9.4 kg	Classificatie	class II, type B

Bel voor een afspraak met onze productspecialist **0182 624 999**  
of stuur een mail naar [sales@doove.nl](mailto:sales@doove.nl)