

STIMULITE® ADJUSTABLE CONTOURED

AANPASBARE ZITKUSSENS MET HONINGRAATSTRUCTUUR

Het nieuwe Stimulite Adjustable Contoured zitkussen combineert de beste eigenschappen van de bekende Stimulite Contoured zitkussens met de mogelijkheid om het zitkussen aan te passen aan veranderende fysieke en functionele behoeften van de gebruiker.




Opgebouwd uit verschillende honingraat lagen. Deze unieke structuur zorgt voor een goede stabiliteit en ondersteuning, gelijkmatige drukverdeling en minimale schuifkrachten.

Het zitvlak is anatomisch gevormd, voorzien van hardere en zachtere delen en biedt een optimale positionering van het bekken.

De geperforeerde honingraten maken luchtcirculatie door het gehele kussen mogelijk. Hierdoor verdampt lichaamsvocht zeer snel en wordt huidverweking voorkomen.

Optimale anti-decubituswerking, hoog zitcomfort, zeer geschikt voor (rolstoel)gebruikers met een dwarslaesie.

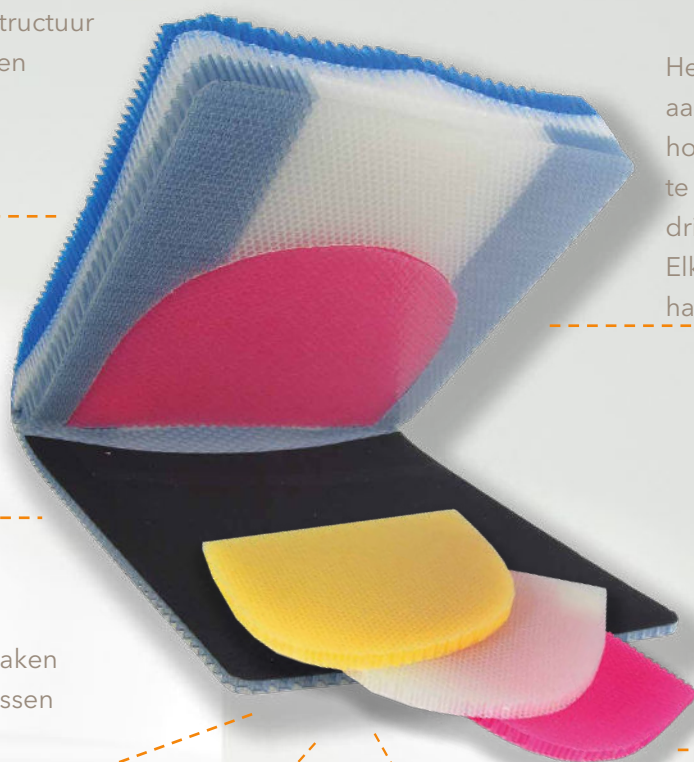

Het zitkussen is eenvoudig aan te passen door de holte aan de onderkant op te vullen met één van de drie losse opvulstukken. Elke kleur heeft zijn eigen hardheid.

Zonder opvulstukken biedt het zitkussen extra verlichting voor gebruikers met beginnende decubitus of benige uitsteeksels.

Lichtgewicht en makkelijk te hanteren.

Direct inzetbaar, onderhoudsvrij en geschikt voor wasmachine en droger.


Leverbaar in zitbreedte en zitdiepte van 36 tot 51 cm.

DOOVECAREGROEP

Bel voor een afspraak met onze productspecialist **0182 624 999**
of stuur een mail naar sales@doove.nl


STIMULITE® ADJUSTABLE CONTOURED

AANPASBARE ZITKUSSENS MET HONINGRAATSTRUCTUUR

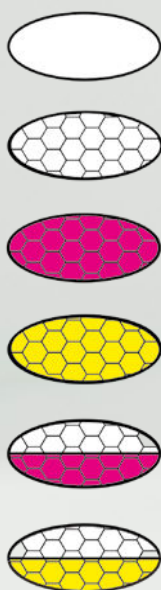

Inzetlaag	Speciaal ontwikkeld voor
Geen	Gebruiker met beginnende decubitus waarbij de zitbotten of andere benige uitsteeksels zoveel mogelijk ontlast moet worden.
Wit	Gebruiker met gebrek aan of te lage spierspanning in combinatie met een hoog decubitusrisico. De witte laag ondersteunt het bekken en helpt een slechte houding of positioneringsproblemen voorkomen.
Magenta	Gebruiker met betere zitstabiliteit en laag decubitusrisico die de huid wil beschermen, maar minder behoefte heeft aan het volledig ontlasten van de zitbotten zoals in regel 1 genoemd.
Goud	Gebruiker die een stabiele basis wil om zelfstandig een transfer te kunnen maken en een lager decubitusrisico heeft ten opzichte van gebruikers die een geen/witte/magenta inzetlaag zouden gebruiken.
Wit op magenta	Gebruiker die een stabiele basis wil om zelfstandig een transfer te kunnen maken met een aanvullende laag voor drukontlasting.
Wit op goud	Gebruiker met behoefte aan het hoogste niveau van ondersteuning voor stabiliteit (gouden inleg) met de beste decubituspreventie (witte inleg). Bedoeld voor gebruikers die geen decubitus hebben (gehad).

Optimale immersie met positionering

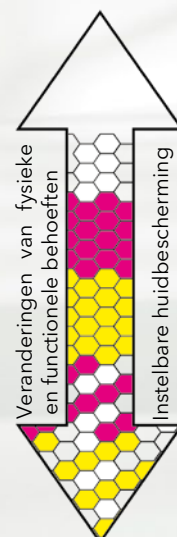

Immersie met aanvullende ondersteuning

DOOVECAREGROEP

Bel voor een afspraak met onze productspecialist **0182 624 999**

of stuur een mail naar sales@doove.nl